

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

年级、专业：	2017 级 物理学	组号：	实验班 2
姓名：	高寒	学号：	17353019
日期：		教师签名：	

实验 E3 材料真空兼容性测试和等离子特性研究

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：

- 1) 预习报告：(提前一周)认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成讲义中的预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（由学生自己在实验前设计好，可以打印）。预习成绩低于 50% 者不能做实验(实验 D2 和 D3 需要提前一周的周四完成预习报告交任课老师批改，批改通过后，才允许做实验)。
- 2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
- 3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**。

3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

实验 E3 材料真空兼容性测试和等离子特性研究

【实验目的】

1. 学习基本的真空知识和技术，掌握真空的获得和测量方法。
2. 通过真空气体放电实验，验证帕邢定律。
3. 了解四极杆质谱仪工作原理，掌握质谱仪的操作，进行真空系统检漏和真空环境分析。
4. 研究等离子体特性，获得等离子体基本参数。
5. 使用质谱仪测试不同材料在真空中的脱气性质，了解材料的真空兼容性。
6. 深入探讨四极质谱仪工作原理。

【仪器用具】

上海宜准公司 VQP01 真空平台。(针对帕邢实验、四极质谱仪测试、质谱图分析等多项实验项目而设计的一台综合性实验装置，该装置由放电腔体、机械泵、分子泵、高压电源、四极质谱仪、真空计以及击穿电压测量系统等装置构成。)

【原理概述】

1. 真空的获得和测量:

在给定空间内，气体压强低于一个大气压的气体状态，称之为真空。真空的获得就是人们常说的“抽真空”，即利用各种真空泵将被抽容器中的气体抽出，使该空间的压强低于一个大气压。真空测量是指用特定的仪器和装置，对某一特定空间内真空高低的测定，这种仪器或装置称为真空计 (仪器、规管)。

2. 固体对气体的吸附及气体的脱附:

气体吸附就是固体表面捕获气体分子的现象，吸附分为物理吸附和化学吸附。其中物理吸附没有选择性，任何气体在固体表面均可发生，主要靠分子间的相互吸引力引起的。物理吸附的气体容易发生脱附，而且这种吸附只在低温下有效；化学吸附则发生在较高的温度下，与化学反应相似，气体不易脱附，但只有当气体和固体表面原子接触生成化合物时才能产生吸附作用。气体的脱附是气体吸附的逆过程。通常把吸附在固体表面的气体分子从固体表面被释放出来的过程叫做气体的脱附。

3. 气体放电、等离子体和帕邢定律:

气体放电的基本过程是利用外 (电) 场加速电子使之碰撞中性原子 (分子) 来电离气体。等离子体由离子、电子以及未电离的中性原子 (分子) 的集合

组成，整体呈中性的物质状态。气体放电是产生等离子体的一种常见形式。帕邢定律是表征均匀电场气体间隙击穿电压、间隙距离和气压间关系的定律。

4. 四极质谱仪：

四极杆上加有直流和射频交流分量电压（势），使得一定质量电荷比的离子可稳定的通过四极杆质量过滤器（离子能够稳定地通过四极电场），而不会撞上或逸出四极杆，可将离子根据质量电荷比进行过滤分类，归纳成质谱。质谱仪采用的电场可以表示为

$$\vec{E} = E_0(\lambda x \vec{e}_x + \sigma y \vec{e}_y + \gamma z \vec{e}_z) \quad (1)$$

电势为

$$\phi(x, y, z) = -\frac{1}{2}E_0(\lambda x^2 + \sigma y^2 + \gamma z^2) \quad (2)$$

本实验中 $\sigma = -\lambda$, $\gamma = 0$ 。电势为

$$\phi(x, y) = -\frac{1}{2}E_0\lambda(x^2 - y^2) \quad (3)$$

或

$$\phi = \frac{\phi_0}{r_0^2}(x^2 - y^2) \quad (4)$$

其中 r_0 是极杆间最小距离的一半。

离子的电场力为

$$\vec{F} = -e\vec{\nabla}\phi = 2e\frac{\phi_0}{r_0^2}(-x\vec{e}_x + y\vec{e}_y) \quad (5)$$

再采取交变电压形式

$$\phi_0 = U - V \cos \Omega t \quad (6)$$

可以得到离子的运动方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{2eU}{mr_0^2} - \frac{2eV \cos \Omega t}{mr_0^2} \right) x = 0 \quad (7)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \left(\frac{2eU}{mr_0^2} - \frac{2eV \cos \Omega t}{mr_0^2} \right) y = 0 \quad (8)$$

据陈智昂调研，早在 1860 年代，数学家 Emile Mathieu 就研究过这种类型的微分方程，这类方程就称为马修方程。不失一般性，我们考虑 x 方向的方程。令 $\xi = \omega t/2$ ，则有

$$\frac{d^2x}{d\xi^2} + \frac{8e}{m\omega^2 r_0^2}(U - V \cos 2\xi)x = 0 \quad (9)$$

再设 $p = \frac{8eU}{m\omega^2 r_0^2}$, $q = \frac{4eV}{m\omega^2 r_0^2}$ ，就得到

$$\frac{d^2x}{d\xi^2} + (p - 2q \cos 2\xi)x = 0 \quad (10)$$

傅里叶级数形式解为

$$x = \alpha' e^{\mu\xi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{2n} e^{2in\xi} + \alpha'' e^{-\mu\xi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{2n} e^{-2in\xi} \quad (11)$$

仅当 μ 是纯虚数时, 才存在稳定解, 而 $\mu = \mu(p, q)$, 因此决定方程是否稳定的参数是 p 和 q 。实验中 ω 是常数, 如果 U 和 V 给定, 那么为了保证稳定解, 离子质量 m 必须取某一特定值。因此改变 U 和 V 就能分离出特定荷质比的离子。

【实验前思考题】

无

专业:	2017 级 物理学	年级:	实验班 2
姓名:	高寒	学号:	17353019
室温:		实验地点:	珠海教学楼 A5
学生签名:	高寒	评分:	
日期:		教师签名:	

实验 E3 材料真空兼容性测试和等离子特性研究

【实验内容、步骤、结果】

1. 使用机械泵和分子泵获得高真空

1. 检查放电管与电源之间的电路连接是否可靠; 电压调节旋钮是否最小位置; 气体流量调节旋钮是否置于最小位置。
2. 检查高压电源开关、分子泵电源开关以及应急开关是否处于断开状态。
3. 检查机械泵、分子泵、帕邢高压电源插头是否插上。
4. 检查帕邢实验高压电源与放电腔体 BNC 接头连接是否正常。
5. 检查完毕后, 推上空气开关, 打开电源总开关。
6. 查看电源按钮、电源指示灯是否正常 (绿色)。
7. 开启机械泵, 抽取真空至 $2 - 3 \text{ Pa}$, 大约需要 10 分钟。

2. 通过真空气体放电实验, 测量击穿电压与电极间隙和气压之间的关系, 验证帕邢定律

1. 测量两电极之间的实际间距。
2. 调节减压阀, 使得流量计前气压在 0-1 大气压之间。
3. 调节流量计的通气流量, 至放电管内气压为 20 Pa 。
4. 观察真空计数据并记录。
5. 打开高压电源开关。
6. 调节电源的电压输出, 可以快速增至 200 V , 然后继续缓慢升高电压, 直至气体发生击穿现象。读取击穿时的电压。记录气压和电压的数值。然后, 把电压降至 0 V 以下, 为下一次测量做好准备。在减小电压的过程中注意观察放电熄灭电压, 并注意其与击穿电压的差别。

注意:

- (a) 增加电压的过程中, 密切观察放电管电压表头和击穿电压表头的示数。
 - (b) 每个气压下, 至少要重复 3 次测量, 以三次击穿电压测量值之间的偏差不大于 15% 为成功测量, 以得到可靠击穿电压。
 - (c) 在气压较高时, 击穿前后, 放电管的电压会有明显下降。接近击穿时的放电管电压为气体击穿电压。
- 7. 增加气体流量, 使气压升高至 30 Pa 左右, 重复 (6) 的测量。
 - 8. 依次增加气体流量, 每次增加 10 Pa 左右, 重复 (6)。直至气压达到 100 Pa。得到 8 组实验数据即可。
 - 9. 减小气压回复至 20 Pa 左右, 重复 (6)。
 - 10. 依次减小气压, 每隔 2 Pa 测量一组数据, 直至 4 Pa。测得 7 – 8 组数据即可。
 - 11. 实验完毕后, 调节气体流量控制旋钮至最小位置, 调节电压至最小值, 依次关闭电压、机械泵、电源开关。

记录人员：_____

电极距离																	
升压过程																	
气压/Pa																	
击穿电压 /V	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	平均值			平均值			平均值			平均值			平均值				
气压/Pa																	
击穿电压 /V	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	平均值			平均值			平均值			平均值			平均值				
气压/Pa																	
击穿电压 /V	1	2	3														
	平均值																
降压过程																	
气压/Pa																	
击穿电压 /V	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	平均值			平均值			平均值			平均值			平均值				
气压/Pa																	
击穿电压 /V	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	平均值			平均值			平均值			平均值			平均值				
气压/Pa																	
击穿电压 /V	1	2	3														
	平均值																

3. 使用四极质谱仪，进行真空系统检漏和真空环境分析

1. 机械泵抽取压强至 10 Pa 以下后才能打开分子泵电源，等待 5 秒钟后，按分子泵电源面板上的绿色按钮，进行分子泵运行 (此时分子泵转速会从 450 转降至 68 转左右进行自检，自检后开始从 68 转上升至 450 转)。
2. 观察真空计显示屏，待分子泵抽取 5.0×10^{-2} Pa 以下再打开四极质谱仪。
3. 继续抽取真空，待压强低于 10^{-3} Pa 后，可通过通气阀加入适量 He、Ne、Ar 等气体，便于通过软件观察各气体质谱图。(切记加入气体后压强勿超过

5.0×10^{-2} Pa, 若超过该压强, 则需继续抽气至低于该压强才能通过软件打开质谱仪灯丝, 否则将严重损坏质谱仪灯丝)。

4. 打开测试软件 VAccuRay3.0 进行实验。
5. 打开软件后点击右键, 选择 Device setup, 出现如图 7 的界面: 首次试验不用改变任何参数, 直接点击 OK。
6. 然后点击任务栏灯丝选项



图 1: 任务栏

此时会出现“**Be Sure pressure Less Than 5.0E-2pa.**”提示, 观察真空计确定真空度低于该提示值是才能点击确定, 否则将损坏四极质谱仪的灯丝, 发生危险。

7. 点击确认后会出现 Spectrum 质谱图, 此时即可通过各种粒子的相对分子质量确定气体的波峰。
8. 右键, 选择 Calculate Width, 进行波峰计算, 并记录相似数值。
9. 记录数据后返回质谱图界面, 右键, 选择 Device setup, 改变参数 resolution 为 30、40、50...100。
10. 点击 OK 后, 重复 5, 6, 7, 8 步骤, 并记录数据。
11. 之后可改变数据 Emission、e Volt 等参数进行上述 5, 6, 7, 8 步骤实验并记录数据, 因实验步骤相同, 此处可由任课教师任选两组参数改变数值进行实验。
12. 实验结束后, 先按分子泵电源面板处红色按钮, 待转速降为 0 时, 才能断开分子泵电源开关, 断开分子泵电源开关后才能断开机械泵开关, 顺序切勿颠倒, 否则将损坏分子泵, 最后关闭总电源。
13. 整理数据, 进行总结。

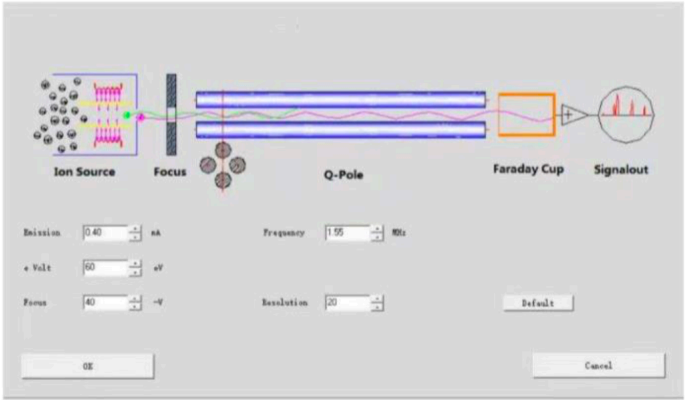


图 2: 软件界面

分辨率				
波峰宽度				

分辨率				
波峰宽度				
分辨率				
波峰宽度				

表 2 测量分辨率对波峰的影响

记录人员: _____

Emission	e Volt	Resolution	波峰宽度
Emission	e Volt	Resolution	波峰宽度

表 3 测量 Emission 和 e Volt 对波峰的影响

4. 利用光纤光谱仪研究气体放电产生的等离子体光谱特性，获得等离子体基本参数

1. 将光纤光谱仪通过 USB 与电脑连接，通过相关软件使光纤光谱仪生效。
2. 将光纤一端与光谱仪连接。
3. 利用装置生成的电压，使气体电离，产生等离子体。此时，将光纤光谱仪的另一端对准生成的等离子体。
4. 通过电脑上的相关软件检测等离子体的光谱，截图即可。

5. 用质谱仪测试不同材料在真空中的脱气性质，了解材料的真空兼容性

1. 将提前准备好的材料放入腔体内。
2. 同实验一的操作，利用配备的抽气装置获取高真空环境（压强为 10^{-3} 量级）。
3. 此时，打开四极质谱仪，并打开相应的电脑软件。软件的操作过程与实验三中的操作过程完全相同。

注意: 使用四极质谱仪的过程中压强不可超过 5.0×10^{-2} Pa，避免损坏质谱仪。

4. 不同材料将具有不同的脱气性质，利用质谱仪检测材料中脱离出来的气体性质，获取质谱，观察峰值的位置并截图。
-
6. 研究四极电场特性及其中离子运动方程，深入探讨四极质谱仪工作原理
见预习报告中“四极质谱仪”部分。

【实验过程中遇到问题记录】

无

专业:	物理学	年级:	2017 级
姓名:	高寒	学号:	17353019
日期:			
评分:		教师签名:	

实验 E3 材料真空兼容性测试和等离子特性研究

【分析与讨论】

(Content)

【实验思考题】

(Content)